


# طريقة إستخدام القمع "الفوليوماتيك" مع البخاخ



ز. بعد الإستخدام، إنزع البخاخ وأعد تغطيته.

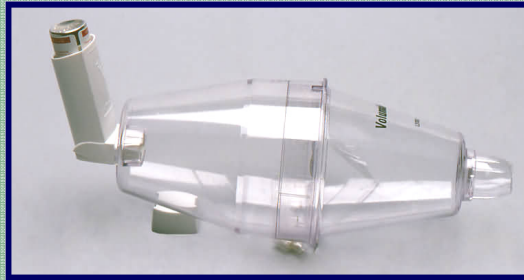

## طريقة تنظيف جهاز القمع "الفوليوماتيك"

أ. فك الجهاز إلي جزئين.

ب. ضع الجهاز في حوض صغير يحتوي على ماء متوسط الحرارة وقليل من الصابون السائل ثم انقع أجزاء الجهاز لمدة عشرين دقيقة.

ج. إغسل الجهاز جيدا بالماء فقط.

د. ضع الجهاز بعد الشطف في مكان نظيف وجاف ليجف تلقائيا بالهواء،

و. لا تستعمل المناديل الورقية أو

القماش للتجفيف.

هـ. تأكد من أن جميع أجزاء الجهاز جافة تماماً قبل تركيبها.



د. ضع القطعة الأمامية من القمع "الفوليوماتيك" في فمك كما هو مبين في الصورة ثم أفل شفتيك حولها جيداً.


هـ. إضغط البخاخ مرة واحدة لتسمح لجرعة الدواء بالخروج لداخل الأنبوب ثم استنشق الدواء داخل صدرك (شهيق) ثم أكتم النفس لمدة عشر ثوان أو حسب المستطاع قبل السماح للهواء بالخروج مرة أخرى (زفير).



و. إذا أردت أخذ جرعة أخرى من الدواء يمكنك تكرار نفس العملية التي سبق شرحها في رقم (د) ورقم (هـ).

## كيف تستعمل البخاخ مع جهاز القمع "الفوليوماتيك"

يتكون جهاز القمع "الفوليوماتيك" من جزئين يجب تركيبهما معاً ليكون قطعة واحدة كما هو مبين في الصورة.

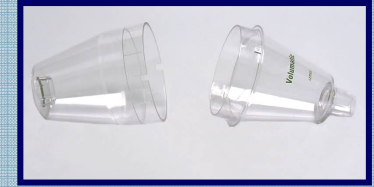

ب. قبل إستعمال البخاخ، إنزع الغطاء ثم رج البخاخ جيداً كما هو مبين في الصورة.



ج. أدخل البخاخ عمودياً إلى أعلى في الفتحة الموجودة في جهاز القمع "الفوليوماتيك" كما هو مبين في الشكل.